

NORIKS Bunion Fix — korektor vbočeného palce

Postupné narovnávání palce při 30 minutách až 3 hodinách denně.

Velikost	Univerzální — vhodný pro všechny velikosti chodidla
Strana	Stejný korektor pro levé i pravé chodidlo
Podložka	Měkká vnitřní podložka, která chrání kůži
Nastavení	Elastické pásky s nastavitelným tahem
Doporučeno	Od 30 minut do 3 hodin denně



V BALENÍ

- 1 korektor vbočeného palce
- Elastické pásky pro nastavení


RYCHLÝ START

1. Nasadte korektor tak, aby polštářek ležel u vystouplé kosti a poutko obepínalo palec.
2. Pásek utáhněte jen natolik, abyste cítili mírný tah — nikdy do bolesti.
3. První týden noste 30 minut denně, poté postupně prodlužujte.

1. Nasazení

- 1 Sedněte si a opřete chodidlo tak, aby prsty byly uvolněné.
- 2 Protáhněte palec poutkem, dokud polštářek nedosedne na vystouplou kost na boku chodidla.
- 3 Pásek vedte kolem středu chodidla a utáhněte jej jen natolik, abyste cítili mírný tah.
- 4 Zkontrolujte, že polštářek leží rovně, bez záhybů, a že pásek netlačí nárt.
- 5 Palec musí být tažen ven, ale bez napětí, které způsobuje bolest.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

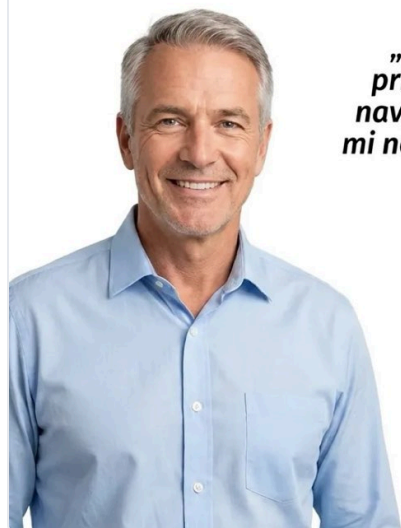

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Korektor obepíná palec a odlehčuje vystouplou kost.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija poravnanja



Patentirani zglobni mehanizam



Podesivo rastezanje



Meko jastučić za čukalj



Vrhunski izdržljivi materijali



Bezbolno poravnanje

Cílem je postupný návrat palce do správnějšího postavení.

2. Plán nošení

Období	Denně	Kdy
1. týden	30 minut	Večer vsedě
2. týden	45 – 60 minut	Večer nebo při odpočinku
3. týden	1 – 2 hodiny	Rozděleno do dvou úseků
Od 4. týdne	2 – 3 hodiny	V jednom nebo dvou úsecích, podle pohodlí

Pravidelnost je důležitější než délka. Třicet minut každý den přinese víc než tři hodiny jednou týdně.

3. Co můžete očekávat

- První dny: pocit protažení a úlevy po sundání korektoru.
- Přibližně po dvou týdnech důsledného používání: menší nepohodlí při chůzi a stání.
- Přibližně po měsíci: viditelnější změna v postavení palce.
- Korektor působí, dokud jej nosíte, a při pravidelném používání — není to jednorázové řešení.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Bolest při nošení	Pásek utažen příliš	Povolte pásek; pocit musí být tah, nikdy bolest
Korektor sklouzává z palce	Pásek utažen příliš volně nebo vlhká kůže	Osušte chodidlo a utáhněte pásek o jeden stupeň
Zarudnutí kůže	Záhyb na podložce nebo zpočátku příliš dlouhé nošení	Srovnejte podložku a zkratzte dobu nošení na 30 minut

5. Čištění

- Otřete vlhkým hadříkem a jemným mýdlem, opláchněte a nechte uschnout na vzduchu.
- Neperte v pračce a nesušte na radiátoru — guma ztrácí pružnost.

Nenoste korektor přes otevřenou ránu ani zanícenou kůži. Při cukrovce, sníženém citu v chodidle nebo silné, trvalé bolesti se nejprve poraďte s lékařem.

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

Bunion Fix je každodenní opora, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.