

NORIKS FisioRest — přístroj na krk

Trakce, teplo a vibrační masáž v sezení od 15 do 30 minut.

Baterie	2500 mAh — až 2 hodiny provozu, přibližně 4 sezení po 30 minutách
Nabíjení	USB-C, 4 – 6 hodin do plného nabití
Ohřev	Do 50 °C, technologie ThermoTrac
Bezpečnost	Automatické vypnutí po 30 minutách
Sezení	15 minut na začátku, později až 30 minut

CERVIKALNA TRAKCIJA VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



V BALENÍ

- 1 přístroj FisioRest
- Nabíjecí kabel USB-C
- Návod

RYCHLÝ START

1. Před prvním použitím přístroj nabíjejte 4 až 6 hodin.
2. Lehněte si na záda a uložte krk do lůžka tak, aby hlava volně visela dozadu.
3. Podržte tlačítko 5 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka; začněte s 15 minutami.

1. Před prvním použitím


- 1 Připojte přiložený kabel USB-C a přístroj nabíjejte 4 až 6 hodin.
- 2 Postavte přístroj na rovný, pevný podklad — postel je pro správnou trakci příliš měkká.
- 3 Sundejte řetízek, náušnice a brýle.
- 4 Lehněte si na záda a uložte krk do lůžka z paměťové pěny.

2. Ovládání


- **Zapnutí:** podržte tlačítko masáže nebo tepla 5 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- **Změna stupně:** krátkým stiskem téhož tlačítka měníte intenzitu.
- **Vypnutí:** znovu podržte tlačítko 5 sekund nebo vyčkejte na automatické vypnutí po 30 minutách.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIČE

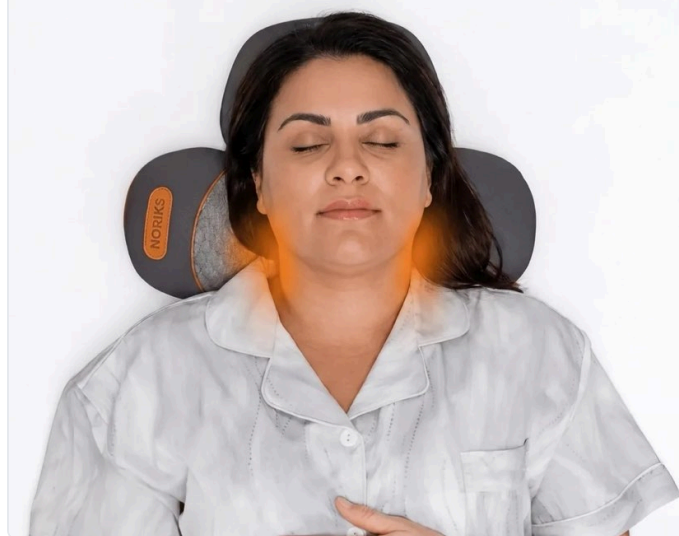

Krk leží v lůžku, hlava volně visí dozadu.

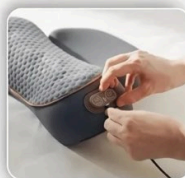


KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priložením adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.

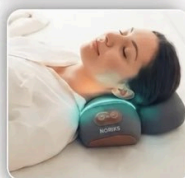

KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključí nakon 30 minuta uporabe*

Toplo, masáž a trakce působí současně.

3. Sezení

Období	Délka sezení	Četnost
První týden	15 minut	1× denně
Druhý týden	20 minut	1× denně
Od třetího týdne	30 minut (celý cyklus)	1 – 2× denně

Celý cyklus jemného tepla, masáže a trakce trvá 30 minut. Na začátku sezení zkratěte, aby si krk zvykl na protažení.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Svidá mi se · Odgovori · Pošalji poruku · Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Svidá mi se · Odgovori · Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Svidá mi se · Odgovori · Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenután.

8w Svidá mi se · Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Svidá mi se · Odgovori · Pošalji poruku · Sakrij · Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav · Odgovori · Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav · Odgovori

11

Po sezení vstávejte pomalu, nejprve se otočte na bok.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapne	Vybitá baterie nebo příliš krátký stisk tlačítka	Nabíjejte 30 minut a podržte tlačítko celých 5 sekund
Protažení není cítit	Přístroj na příliš měkkém podkladu nebo krk příliš vysoko	Přejděte na pevný podklad a spusťte ramena k podlaze
Teplo působí slabě	Přístroj se ještě zahřívá	Zahřívání trvá několik minut; přístroj nepřikrývejte
Závrať po sezení	Příliš rychlé vstávání	Zůstaňte ležet 1 – 2 minuty, otočte se na bok a teprve pak vstaňte

Co se děje	Příčina	Řešení
Baterie rychle klesá	Trvalé používání nejvyššího stupně ohřevu	Ohřev spotřebuje nejvíc; používejte střední stupeň

5. Čištění a skladování

- Otřete vlhkým hadříkem; přístroj nikdy neponořujte do vody a neomývejte pod proudem.
- Potah, je-li snímatelný, perte ručně ve studené vodě.
- Skladujte na suchém místě, mimo přímé slunce. Baterie vydrží nejdéle, pokud přístroj nenecháváte měsíce vybitý.

Přístroj nepoužívejte, máte-li kardiostimulátor, po operaci krční páteře, při osteoporóze, silné nebo do paže vystřelující bolesti, při neléčeném vysokém krevním tlaku a v těhotenství — nejprve se poradte s lékařem. Sezení přerušte, pokud pocítíte bolest, brnění nebo nevolnost.

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

FisioRest je přístroj k uvolnění a každodenní opoře, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.