

## NORIKS FIT — kompresní tričko

Přiléhavá komprese, která vyhlazuje siluetu a podporuje vzpřímené držení těla.


Úplet **Kompresní úplet s mikrotkanými vlákny**

Velikosti **S – 5XL podle tělesné hmotnosti**

Nošení **4 – 10 hodin denně, pod oblečením**

Praní **Studeně, šetrný program, bez aviváže**

Sušení **Na vzduchu — sušička kompresi zničí**

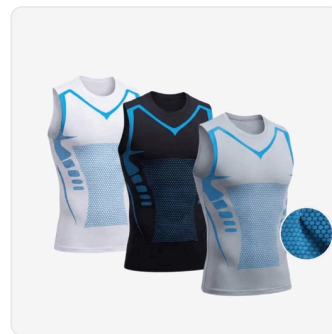

### V BALENÍ

- 1 kompresní tričko (podle zvoleného balení)

### RYCHLÝ START

1. Velikost zvolte podle tělesné hmotnosti; pro silnější kompresi vezměte menší číslo.
2. Tričko natahujte zdola nahoru a úplet přitom uhlazujte dlaní.
3. Perte studeně a sušte na vzduchu — nikdy v sušičce.

## 1. Výběr velikosti

| Velikost | Tělesná hmotnost |
|----------|------------------|
| S        | 50 – 70 kg       |
| M        | 70 – 90 kg       |
| L        | 90 – 110 kg      |
| XL       | 110 – 130 kg     |
| 2XL      | 130 – 150 kg     |
| 3XL      | 150 – 170 kg     |
| 4XL      | 170 – 190 kg     |
| 5XL      | 190 – 210 kg     |

Velikost volte podle hmotnosti, ne podle velikosti běžného trička. Mezi dvěma velikostmi: menší číslo dává silnější kompresi, větší více pohodlí při celodenním nošení.

## 2. Oblékání

- 1 Tričko srolujte až k výstřihu, jako punčochu.
- 2 Protáhněte hlavu a ruce, poté jej rozbalujte směrem dolů.
- 3 Dlaní uhladte úplet od pasu k hrudi, aby nikde nezůstal záhyb.
- 4 Spodní okraj přetáhněte přes boky — tričko se tak neroluje nahoru.

## Kako NORIKS djeluje?

Aktivna kompresija koja uklanja muške grudi

Ionska zona koja poboljšava formu, jača mišice i podiže energiju

Pojačano djelovanje na salo oko struka za razgradnju masnih stanica



Komprese rovnoměrně vyhlazuje siluetu.



Rozdíl v držení těla s tričkem a bez něj.

### 3. Jak dlouho nosit

- První dny: 3 – 4 hodiny denně, dokud si na tlak nezvyknete.
- Poté: 8 – 10 hodin, během pracovního dne.
- Nespěte v něm — kůže potřebuje období bez komprese.
- Aby byl vliv na držení těla vidět, noste jej denně; první změny uživatelé obvykle popisují asi po dvou týdnech.

### 4. Řešení problémů

| Co se děje              | Příčina                                      | Řešení                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tričko se roluje nahoru | Příliš krátká nebo malá velikost             | Přetáhněte okraj přes boky; pokud se to opakuje, vezměte větší číslo |
| Ztěžené dýchání vsedě   | Zvoleno příliš malé číslo                    | Přejděte na větší číslo — komprese nesmí omezovat dech               |
| Komprese zeslábla       | Sušička nebo aviváž                          | Perte studeně, bez aviváže, sušte na vzduchu                         |
| Zarudnutí pod paží      | Záhyb úpletu nebo příliš dlouhé první nošení | Uhladte úplet a zkratěte nošení na 3 – 4 hodiny                      |

### 5. Praní a péče

- Praní v pračce ve studené vodě, šetrný program, naruby.
- Bez bělidla a aviváže.
- Nesušte v sušičce — sušte na vzduchu naplocho, aby se zachovala komprese i tvar.
- Nežehlete.

### 6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.

- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

NORIKS FIT je oděv pro každodenní oporu, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.